

## Sistema di Puntura Follicolare Bonn

Il sistema di puntura follicolare "Bonn" è dotato di una doppia valvola a 3-vie per permettere la gestione del flusso di lavaggio sia da parte dell'assistente che da parte del medico. E' inoltre dotato di uno stopper in silicone adattabile ai tubi a fondo rotondo da 14 mL della BD-Falcon. I tubi sono in polietilene.

Il sistema è disponibile con aghi di aspirazione di diametro esterno di 1.4mm (17G) o 1.6mm (16G) e con marker ecogeno etched o milled.

*Il sistema di puntura follicolare "Bonn" c'è disponibile anche nella versione con stopper in silicone adatti ai tubi Sarstedt da 26 ml. In caso di ordine menzionare "extra".*

Su richiesta è possibile configurare il sistema di puntura follicolare più adatto alle vostre esigenze (ordine minimo 50-pezzi)

### Dati Tecnici


Doppia valvola a 3 vie per lavaggio follicolare

Ø esterno ago: 1.4mm (17G) o 1.6mm (16G)  
lunghezza ago : 32cm

Stopper in silicone per tubi BD-Falcon 2001  
Prodotto di classe 2 a  
testato per embriotossicità  
sterilizzato a raggi gamma  
confezione singola

unità di vendita: 15 pezzi

Articolo No.	17G	16G
Marcatore ecogeno 5-ring milled	481236	—
Marcatore ecogeno etched	481237	681237

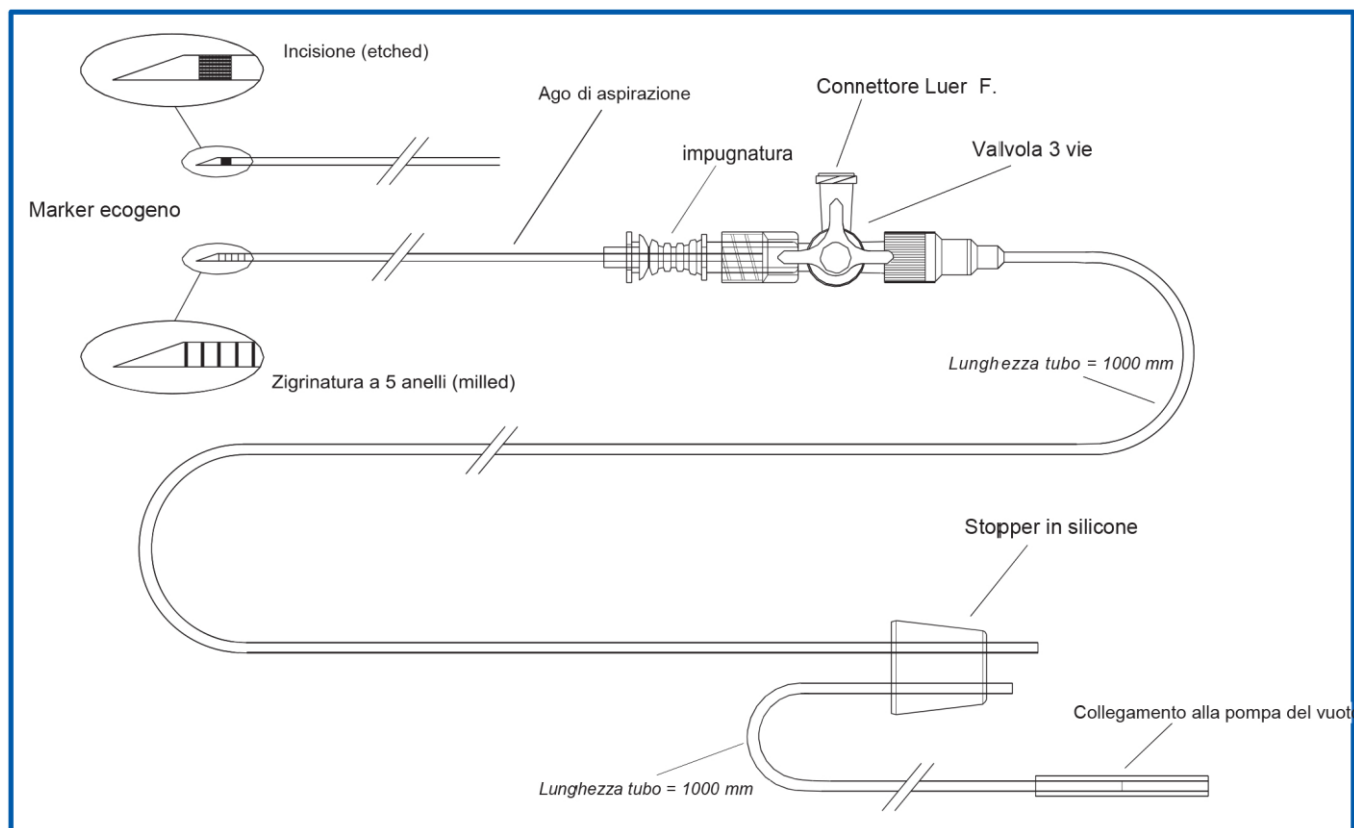

## Sistema di Puntura Follicolare Linz

Il sistema di puntura follicolare "Linz" è equipaggiato con una valvola a 3-vie all'impugnatura dell'ago di aspirazione che permette il flusso di lavaggio dei follicoli attraverso il connettore laterale Luer-Femmina usando una siringa od un tubo. I tubi del sistema sono in polietilene ed hanno uno stopper in silicone adattabile ai tubi con fondo rotondo della BD-Falcon.

Il sistema è disponibile con ago di aspirazione con diametro esterno di 1.4mm (17G) o 1.6mm (16G) e con un sistema di marcatore ecogeno ad anelli o zigrinato.

*Il sistema di puntura follicolare "Linz" può essere fornito con lo stopper adattabile ai tubi Sarstedt da 26 mL. In caso di ordine menzionare extra.*

Su richiesta è possibile configurare il sistema di puntura follicolare più adatto alle vostre esigenze (ordine minimo 50 pezzi).

### Dati Tecnici

Valvola a 3-vie per il lavaggio del follicolo  
 Ø esterno ago: 1.4mm (17G) o 1.6mm (16G)  
 Lunghezza ago : 32cm


Stopper in silicone per tubi BD-Falcon 2001

Prodotto di classe 2 a  
 Testato per embriotossicità  
 Sterilizzato con raggi gamma  
 Confezione singola

Unità di vendita: 15 pezzi

Articolo No.

	17G	16G
Marcatore ecogeno 5-ring milled	481238	-
Marcatore ecogeno etched	481239	681239

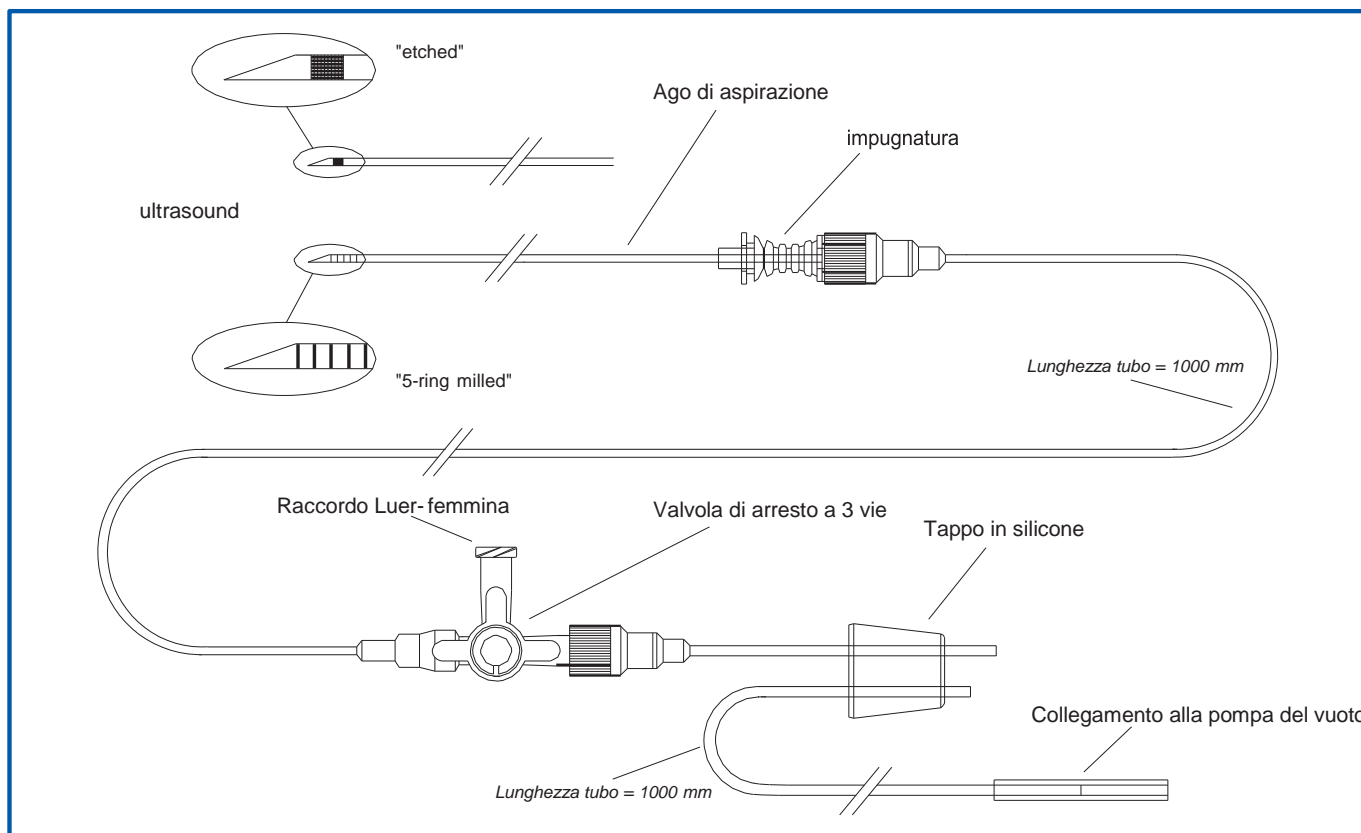

## Sistema di Puntura Follicolare Tübingen

Il sistema di puntura follicolare "Tübingen" è equipaggiato con una valvola a 3 vie posta al livello del tappo in silicone (adattato per il tubo a fondo arrotondato di 14 ml della BD-Falcon) e permette il lavaggio dei follicoli operato dall'assistente. I tubi sono in polietilene.

Il sistema è disponibile con aghi di aspirazione con diametro esterno di 1.4 mm (17G) o di 1.6 mm (16G) e con marker ecogeno inciso o ad anelli zigrinati.

*Il sistema di puntura follicolare "Tübingen" può essere consegnato anche con tappi adatti ai tubi Sarstedt da 26 ml. In caso di ordini menzionare extra.*

Su richiesta è possibile preparare il sistema di puntura follicolare più adatto alle esigenze individuali (ordine minimo 50 pezzi).

### Dati Tecnici

Sistema con valvola a 3 vie per il lavaggio del follicolo

Ø esterno ago: 1.4mm (17G) o di 1.6mm (16G)  
Lunghezza ago: 32cm

Tappo in silicone per tubi della BD-Falcon  
Prodotto di classe 2 a

Testato per embriotossicità  
Sterilizzato a raggi gamma  
Confezionato individualmente  
Unità di vendita: 15 pezzi

Articolo No.

	17G	16G
Marcatore ecogeno	481232	-
5-ring milled		
Marcatore ecogeno	481233	681233
etched		